

Rekonditioneringsanvisning

Taurus H Premium

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta gåbordet används och vilken påfrestning den har utsatts för.

Vid tvätt och rengöring rekommenderas vatten och mildt rengöringsmedel. Maskintvätt i diskabinett som används på hjälpmedelscentraler kan användas. Använd inte slipmedel eller ånga.

Gåbordet kan desinficeras med desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi rekommenderar inte användning av klor och fenolmedel. Låt det lufttorka tills det inte längre finns någon ytfukt på produkten.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

☐ Armstöd

Kontrollera att armstödsbreddning fungerar.

Kontrollera att armstöd är hela och rena.

☐ Handtag

Kontrollera att handtagsinställning fungerar.

Kontrollera att grepp inte är skadade eller smutsiga.

☐ Rörstomme och ram

Kontrollera att inga mekaniska skador finns.

Kontrollera att skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.

☐ Höjdjustering

Kontrollera att höj och sänkning fungerar och att höjdjusteringsspakarna inte är skadade.

Kontrollera att gåbordet känns stabilt vid maxinställning.

☐ Hjul

Kontrollera att hjul rullar lätt samt att slitbanan ej är skadad.

Kontrollera att länkhjulen svänger lätt och att bromsen låser länkhjulen.

☐ Bromsar

Kontrollera bromseffekt och justera eventuellt bromsvajrar vid behov.

Kontrollera att bromshandtag och vajrar ej är skadade eller slitna.

☐ Allmänt

Kontrollera att gåbordet känns stumt och glappfritt.

Kontrollera att gåbordet inte skramlar vid manövrering.

Kontrollera att gåbordet inte är smutsigt och att alla hjul är i kontakt med underlaget när gåbordet står plant.

☐ Provkörning

Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.

Modell: _____

Serienummer: _____


Ägare: _____

Anmärkningar/Anteckningar:

Åtgärdad av: _____

Ort och datum: _____

Explosion ritning Taurus H Premium, 814787

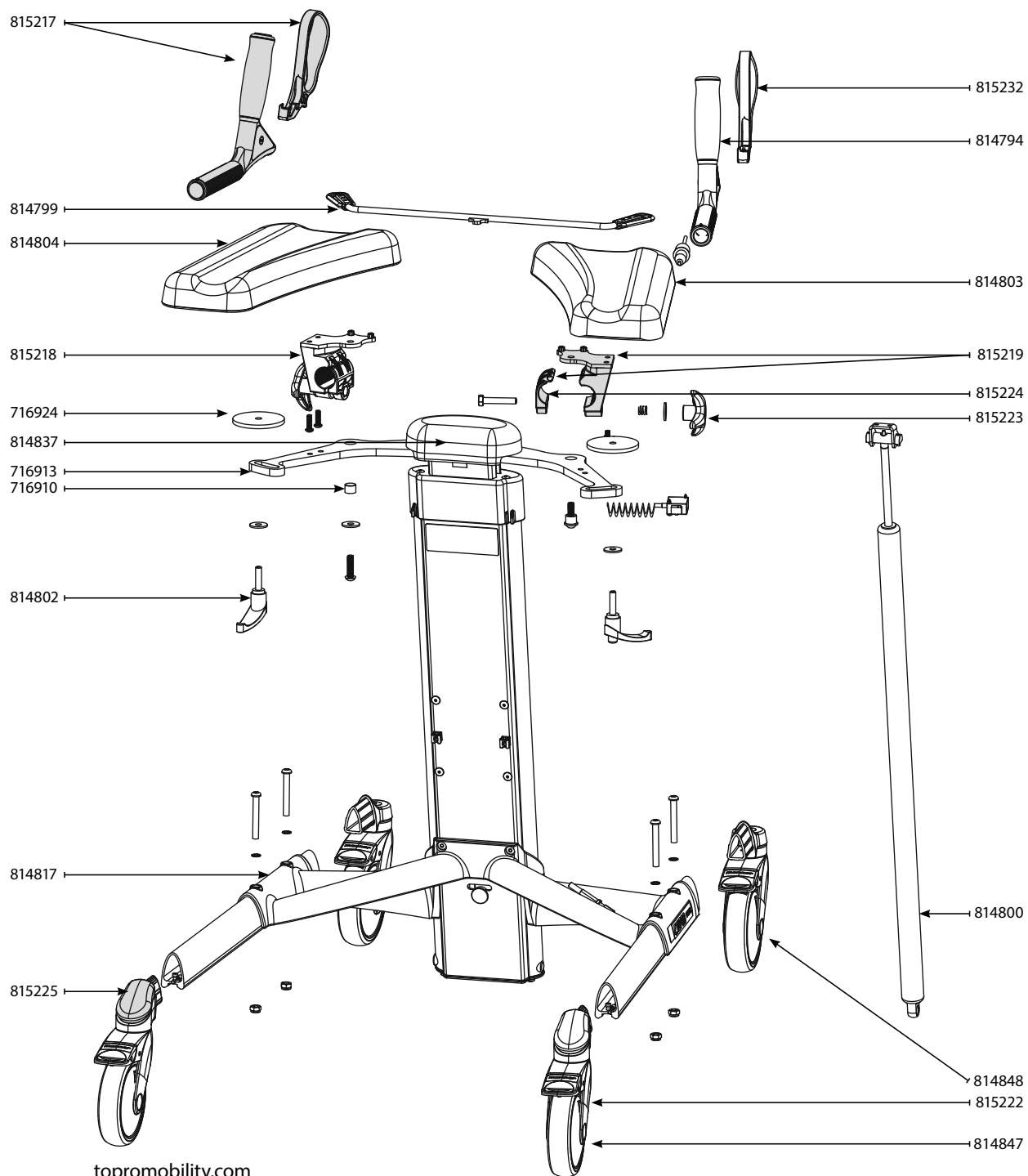

Reservdelar TOPRO Taurus H Premium, 814787

Art. nr.	Artikelbenämning / beskrivning
716910	Avståndshylsa armdynfäste, fram till december 2019
814804	Armdyna, vänster
814803	Armdyna, höger
716913	Armstödsplatta
814799	Utlösare för lyftfunktion, komplett
815232	Bromshandtag, st., från december 2019
815216	Bromsvajer inkl. lock till bakhjulssats, par, från dec. 2019
814800	Gassfjäderr 130 N
815217	Handtag komplett inkl. bromshandtag, st., från dec. 2019
814794	Grepp, sett, 2004 - dec. 2019
815218	Klämma för handtag, komplett, vänster, från dec. 2019
815219	Klämma för handtag, komplett, höger, från dec. 2019
815224	Klämma för handtag, lös, från dec. 2019
814837	Center pad
814817	Tvärbalk
815222	Bakhjul for handbroms, Ø125 mm, från dec. 2019
815225	Lock för bakhjulssats, från dec. 2019
814848	Hjul, Ø125 mm, från SN 6258
814847	Bakhjul for handbroms, Ø125 mm, komplett, från 2011
814802	Låsspak för armdyna
716924	Bricka för armdyna
815223	Låsratt för handtag inkl. fjäder och skruv, från dec. 2019
716922	Övre styrskena (inuti)
716923	Nedre styrskena (inuti)