TOPRO Troja Original

Rekonditioneringsanvisning
Model No. 815400, 815410, 81542
0 Art. No.105032R-K, 2026-03-16

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta rollatorn används och vilken påfrestning den har utsatts för.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

För att säkerställa en trygg och säker produkt skall endast originaldelar användas. Produktgarantin och CE-märkningen är ogiltiga om otillåtna reservdelar har använts på produkten.

Rengöring
Rollatorn kan rengöras med en fuktig trasa. Vid ansamling av lera och smuts kan en trasa med ett milt tvättmedel användas följt av sköljning med ljummet vatten. Undvik att spola direkt mot kullager (i hjul och framgafflar) vid användning av högtryckstvätt. Använd inte slipmedel eller ångtvätt. Torka rollatorn med en mjuk trasa. Vid rengöring i automatiska tvättsystem gäller följande: Tvätt; 60°C, 10 min (tryck max 4 bar, pH-neutral) - torkning; 70°, 10 min. Låt rollatorn svalna i rumstemperatur före användning.

Desinfektion
Desinfektion får endast utföras av behörig personal. Under desinfektion måste tillräcklig skyddsutrustning bäras och instruktionerna från desinfektionsmedelstillverkaren måste följas. Rollatorns yta ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel/-metoder som innehåller klor eller fenol. Använd inte värmedesinfektion.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

☐ **Hjul**
- Kontrollera att hjulen ej är skadade och att de snurrar lätt utan oljud.
- Kontrollera att hjulen är ordentligt fastsatta
- Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsning som förstörs när de demonteras. Bakhjulsaxlarna måste vara fria från fett vid montering av hjulet.

☐ **Gaffel**
- Kontrollera att framgaffel sitter fast ordentligt och att den kan rotera.
- Mutter och skruv som fäster gaffel till hjul får ej röras. Vid demontering av framhjul måste mutter och skruv bytas, då de innehåller en självlåsning som förstörs när de demonteras.

☐ **Bromsar**
- Kontrollera att både färd- och parkeringsbroms tar jämnt och ordentligt.
- Efterjustera och rengör bromsklossar samt bromsfjädrar vid behov.
- Kontrollera att det inte är några skador på bromsvajer.

☐ **Handtag**
- Kontrollera att handtag ej är skadat och att det sitter fast ordentligt i korrekt position.
- Kontrollera att höjdjustering av handtag går lätt.
- Kontrollera att minnesstycket är inställt för maximal handtagshöjd (nedersta hålet i handtagsröret).
- Kontrollera att låsratten som håller handtagen sitter ordentligt i aluminiumprofilen (gäller ej modeller med ny höjdjustering*).

☐ **Sits**
- Kontrollera att sits ej är skadad.

☐ **Fällmekanism**
- Kontrollera att fällningen går lätt och att låsningen fungerar i utfälld position.
- Kontrollera att transportlåset sitter ordentligt i ihopfälld position.

☐ **Ram / Chassi**
- Kontrollera att inga mekaniska skador finns på chassit.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Vid demontering av skruv mellan ram och kryss: skruven måste ersättas med en ny då den innehåller en självlåsning som förstörs när den demonteras.

☐ **Produktetikett**
Kontrollera att etiketten med CE-märkningen finns kvar, sitter ordentligt och att den går att läsa.

☐ **Reflexer**
Kontrollera att reflexerna är kvar och att de syns.

☐ **Provkörning**
- Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.
- Kontrollera att rullatorn känns stabil och är enkel att manövrera utan oljud.
- Kontrollera att alla hjul står stadigt på underlaget och att det inte finns någon skevhet i chassit.


Modell: _____
Serienummer: _____
Ägare: _____

Åtgärdad av: _____
Ort och datum: _____

Anmärkningar/Anteckningar:

_____
_____
_____

Sprängskiss
815400 TOPRO Troja Original M
815410 TOPRO Troja Original S
815420 TOPRO Troja Original X

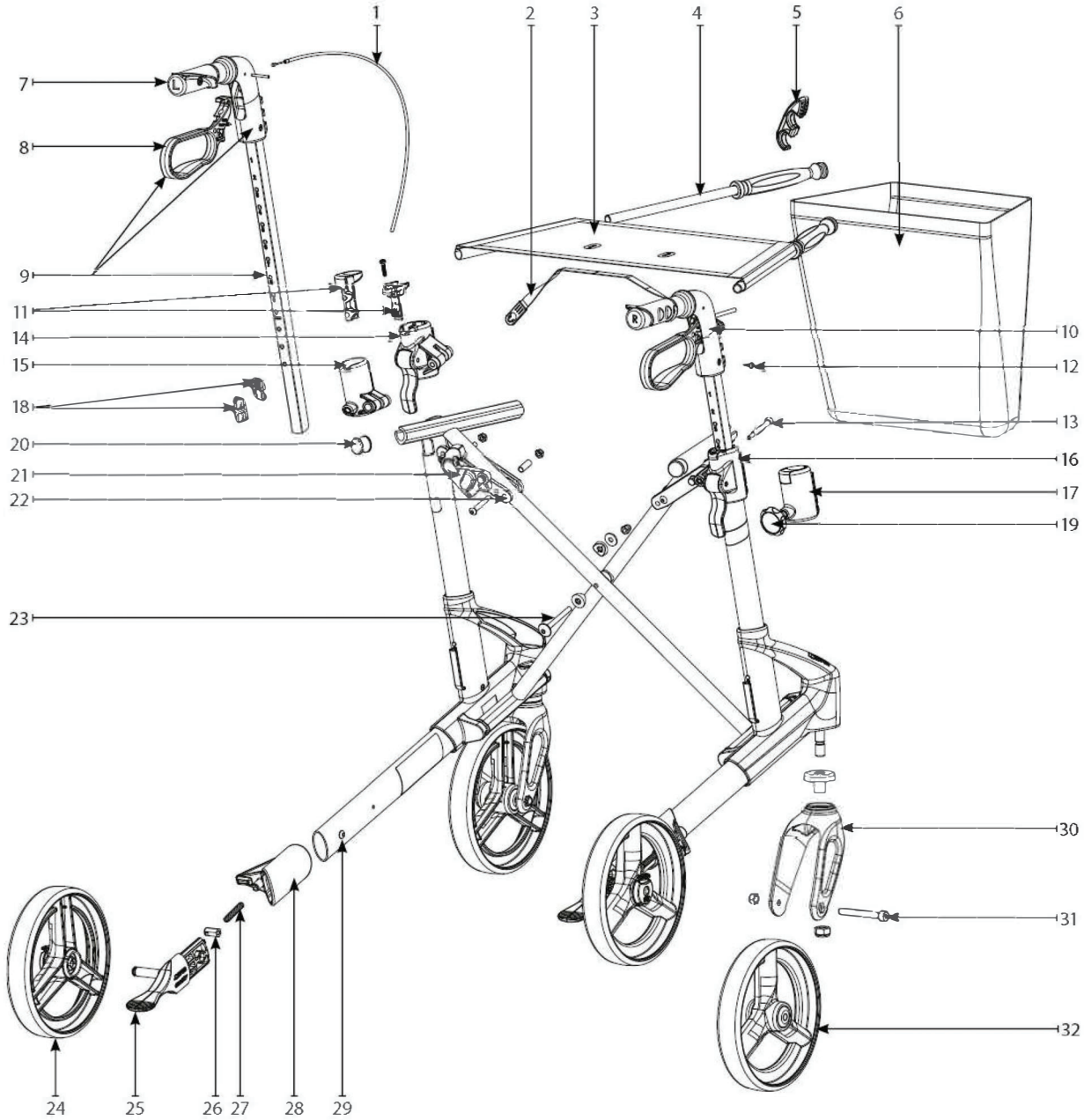

TOPRO Troja Original

Rekonditioneringsanvisning
ModelNo.815400,815410,815420
Art. No.105032R-L, 2026-08-27

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenamning/beskrivning
1	814792	Bromsvajer och fjader,st. (for storlek M/S)
	814131	Bromsvajer och fjader,st. (for storlek X)
2	814150	Rem for hopfallning (for storlek M/S)
	814151	Rem for hopfallning (for storlek X)
3	814759	Sits (for storlek M/S)
	814134	Sits (for storlek X)
4	814791	Sitsstag lang (for variant 110300,110301,110302,110303,110304,110700,110701, 110704,111300,111301,111304,111700,111701,111704,112301,112304,112700, 112701)
	815888	Sitsstag kort (for variant 110200,110201,111200,111201)
5	815310	Lashake/transportlas (for variant 110300,110301,110302,110303,110304,110700, 110701,110704,111300,111301,111304,111700,111701,111704,112301,112304, 112700,112701)
	815280	Lashake/transportlas (for variant 110200,110201,111200,111201,112201)
6	815237	Korg,for storlek M/S
	814129	Korg,for storlek X
	816032(M)/ 816051(S)	Korg,for storlek M/S (for modeller med ny hojdjustering***)
	816033	Korg,for storlek X (for modeller med ny hojdjustering***)
7	814680	Grepp anatomiskt,par
8	815232	Bromshandtag,st.
9	815806	Handtag,komplett,vanster,for storlek M grå (for mod. med låserad hojdjustering)
	815808	Handtag,komplett,vanster,for storlek S grå (for mod. med låserad hojdjustering)
	815866	Handtag,komplett,vanster,for storlek X grå (for mod. med låserad hojdjustering)
	816040	Bromshandtag,komplett,vanster,for storlek M grå (for mod. med ny hojdjustering***)
	816042	Handtag,komplett,vanster,for storlek S grå (for mod. med ny hojdjustering***)
	816044	Handtag,komplett,vanster,for storlek X grå (for mod. med ny hojdjustering***)
10	815807	Handtag,komplett,hoger,for storlek M grå
	815809	Handtag,komplett,hoger,for storlek S grå
	815867	Handtag,komplett,hoger,for storlek X grå
	816041	Bromshandtak,komplett,hoger,for storlek M grå (for mod. med ny hojdjustering***)
	816043	Handtag,komplett,hoger,,for storlek S grå (for mod. med ny hojdjustering***)
	816045	Handtag,komplett,hoger,for storlek X grå (for mod. med ny hojdjustering***)

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
11	815383	Faststycke, gratt
	816038	Faststycke, gratt (for modeller med ny hojdjustering***)
	815938	Faststycke, svart par (for modeller med ny hojdjustering***)
12	104788	Skruv till handtag
13	816083	Kryssinfastning (ej for modeller med ny hojdjustering***)
14	815946	Hojdjusteringsmekanism***, vanster/ hoger svart
14	816034	Hojdjusteringsmekanism***, vanster grå
15	815335	bvre kryssfaste, vanster, gra
16	815946	Hojdjusteringsmekanism***, vanster/ hoger svart
16	816035	Hojdjusteringsmekanism***, hoger grå
17	815334	bvre kryssfaste, hoger, gra
18	816050	Minnesstycke
19	815892	Lasratt med reflex, gra
20	815269	Bakre faste for sits, par
21	814727	Lasningsmekanism
22	815840	Parallellstag, for storlek M/5
23	814778	Kryssbult
24	816108	Bakhjul, svart par
24	816023	Bakhjul, st. grå - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
~~24~~	~~815373~~	~~Bakhjul, st.**~~
25	815914	steghjalp, svart par
26	716520	Faste for bromsvajer
27	Fig.Nr.1	Bromsfjäder säljs inte separat, ingår i position 1
28	815909	Bromskloss, svart par
29	101362	Skruv, M6 x 20 mm
30	815911	Framgaffel, svart par
31	815831	Hjulskruv - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
31	815399	Hjulskruv**
32	816107	Framhjul, svart par
32	816022	Framhjul, st grå. - fr.o.m. serienummer 0000229728001 (oktober 2023)*
~~32~~	~~815372~~	~~Framhjul, st.**~~

Nya reservdelar till Black Series har lagts till och färgkodats

Hjul

Ny design	Gammal design
	

ny hojdjustering***)

