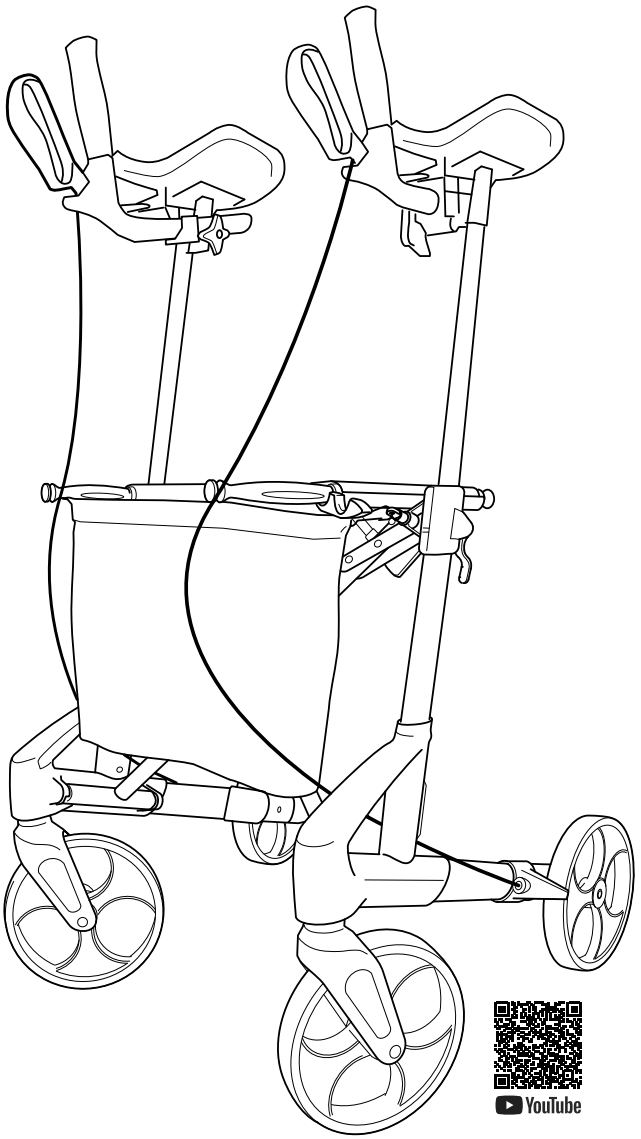
EN

SV

TOPRO

# Instructions for use
# TOPRO Troja Walker² (SE)




7 YEAR WARRANTY

CE

topromobility.com

made in Norway

EN

# Illustrations
# Dimensions
# Technical data
# Article numbers

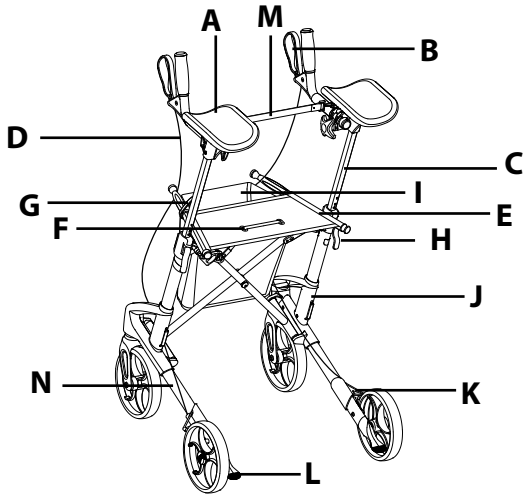
SV

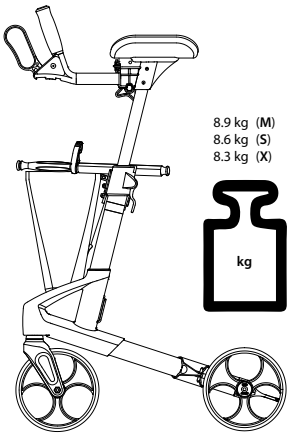
# Illustrationer
# Mått
# Teknisk data
# Artikelnummer

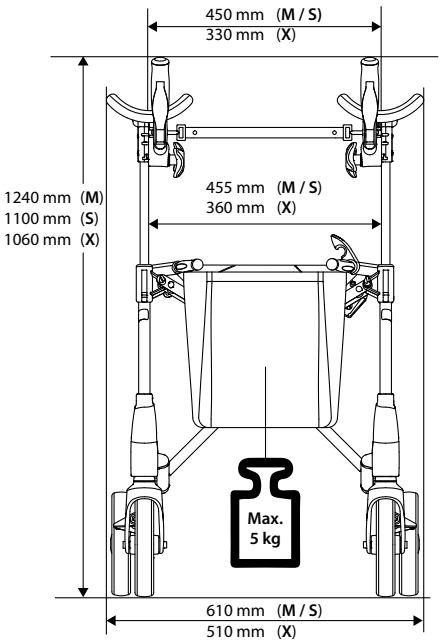
Art. No. User Manual: 104848 – Revision D, 2026-06

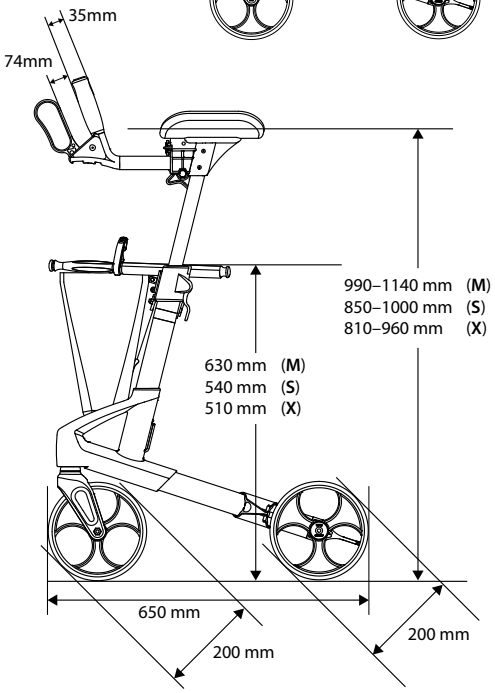
**TOPRO Troja Walker² M 815430**
**TOPRO Troja Walker² S 815440**
**TOPRO Troja Walker² X 815450**

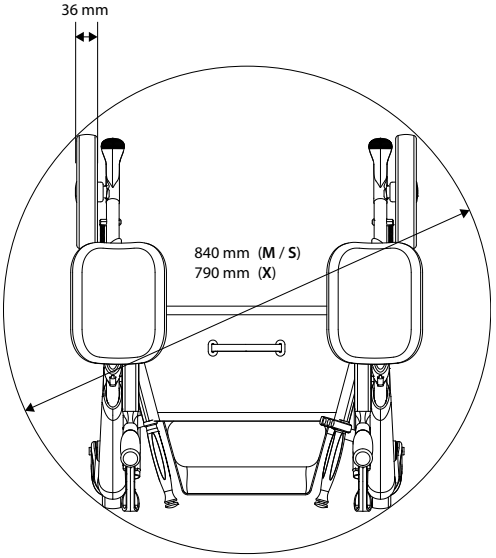
1

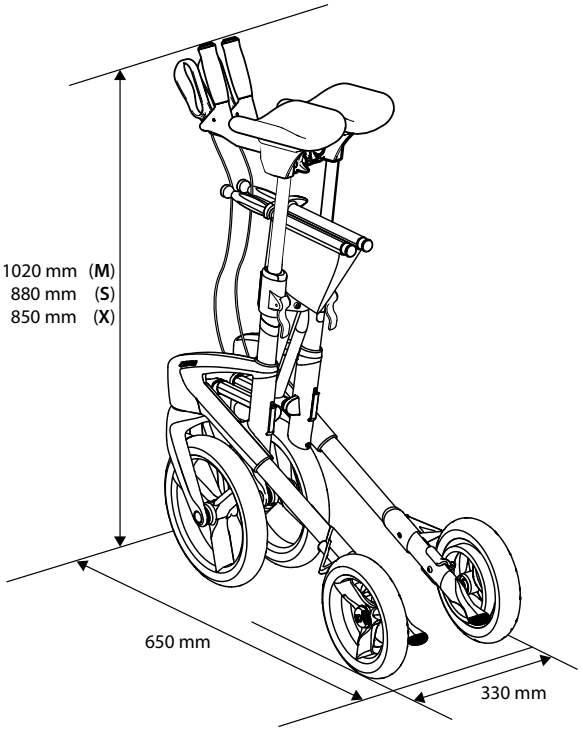


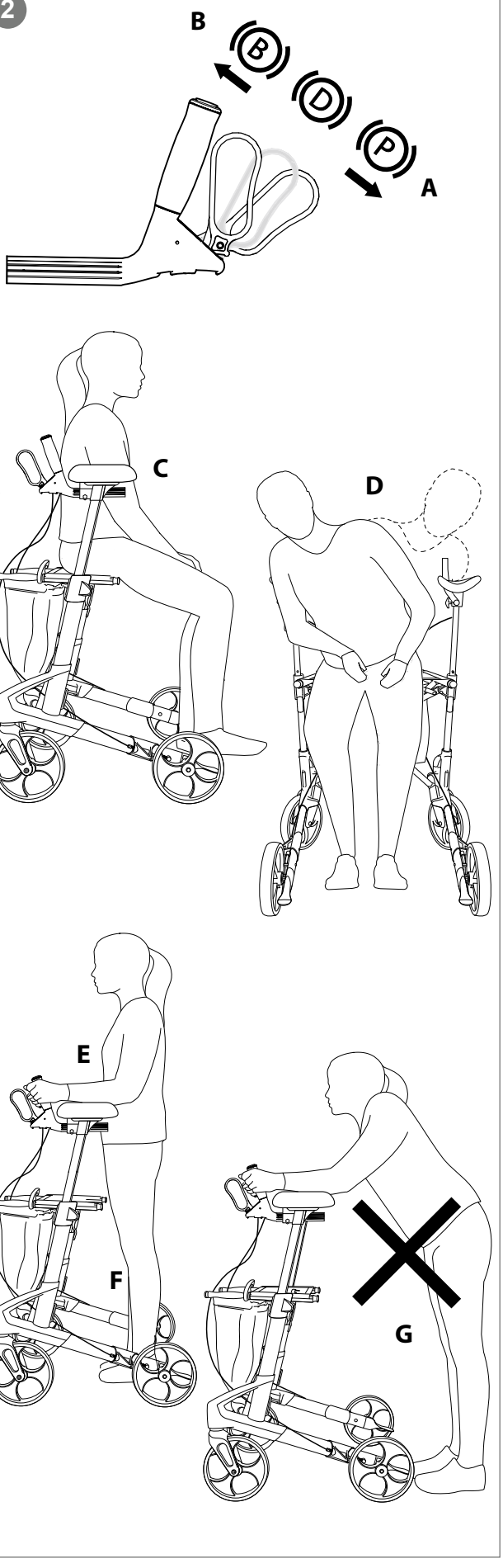



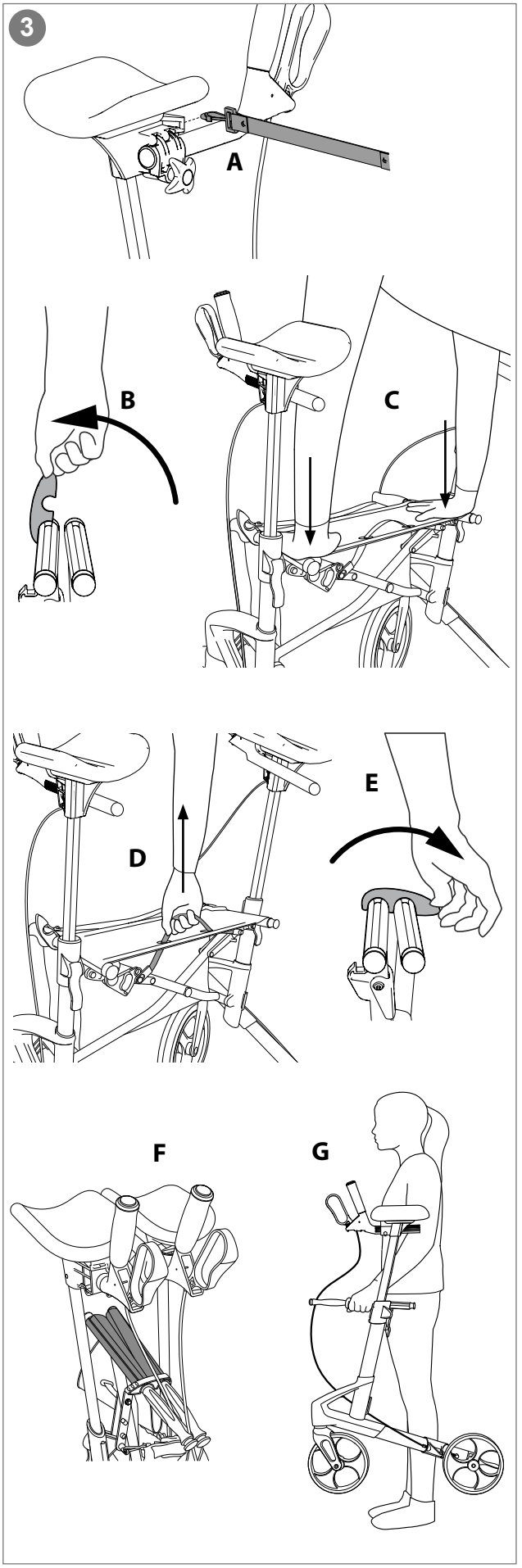



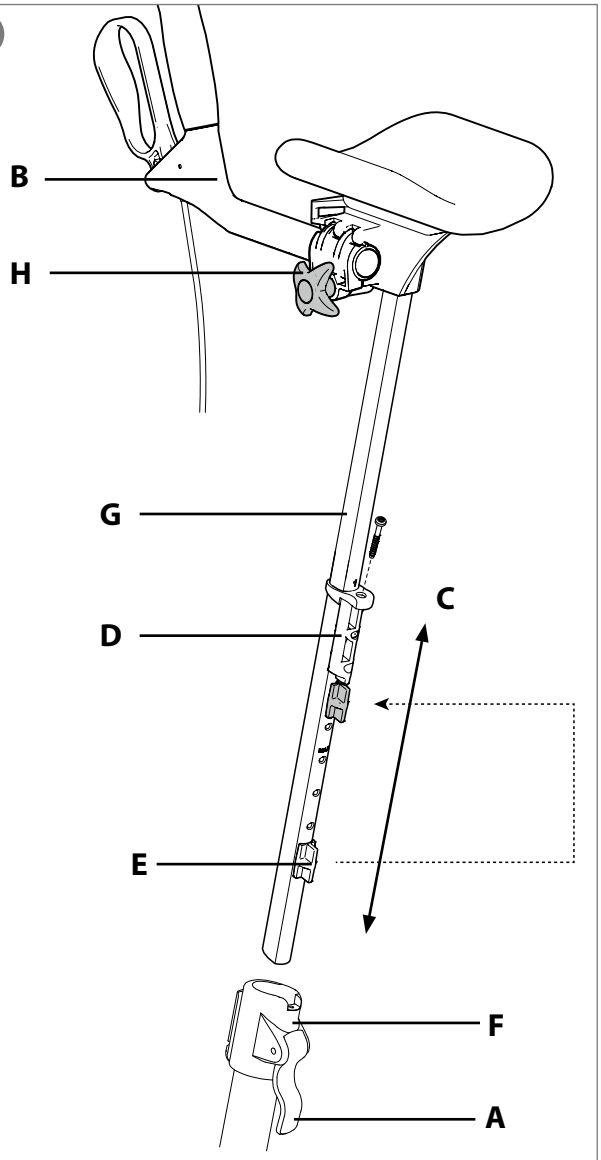
2



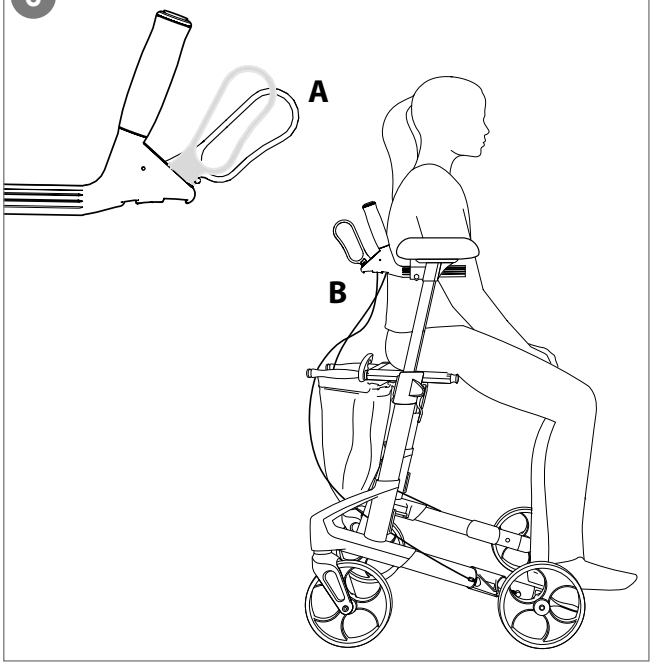

3



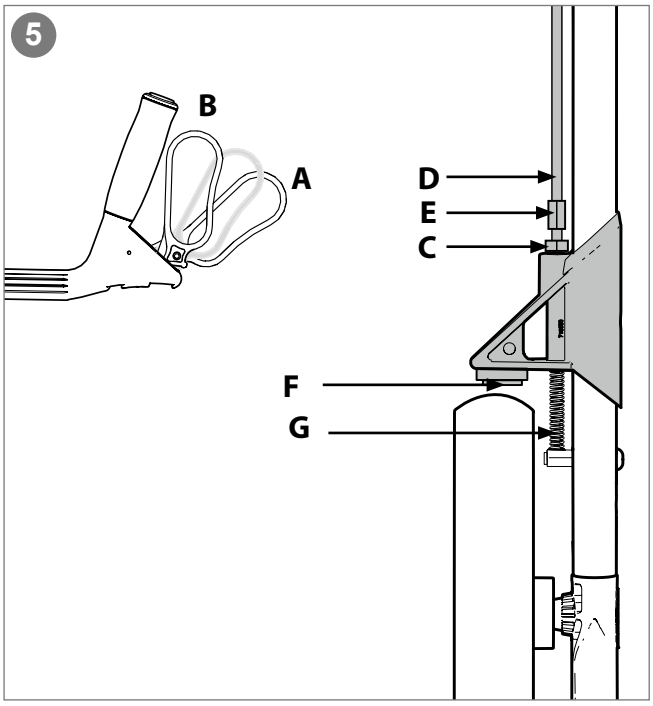
4



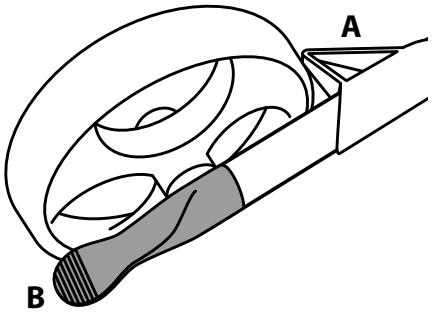

6

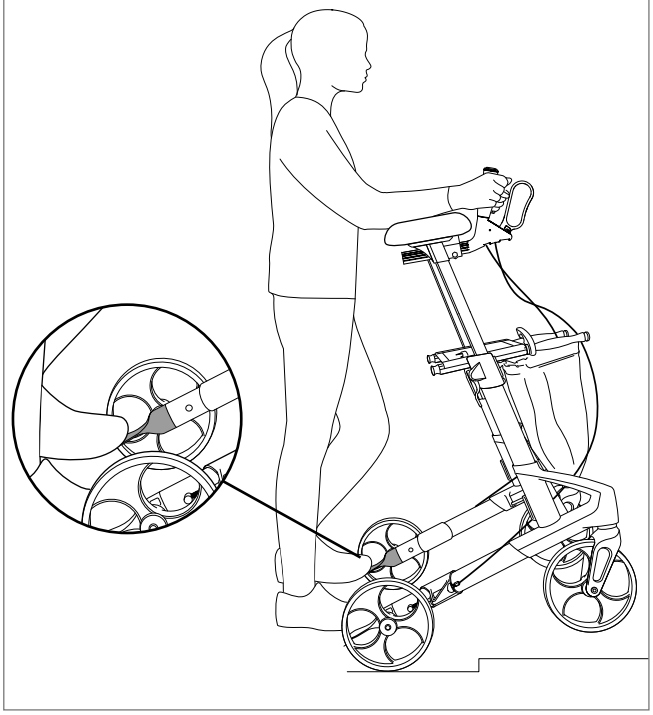



5

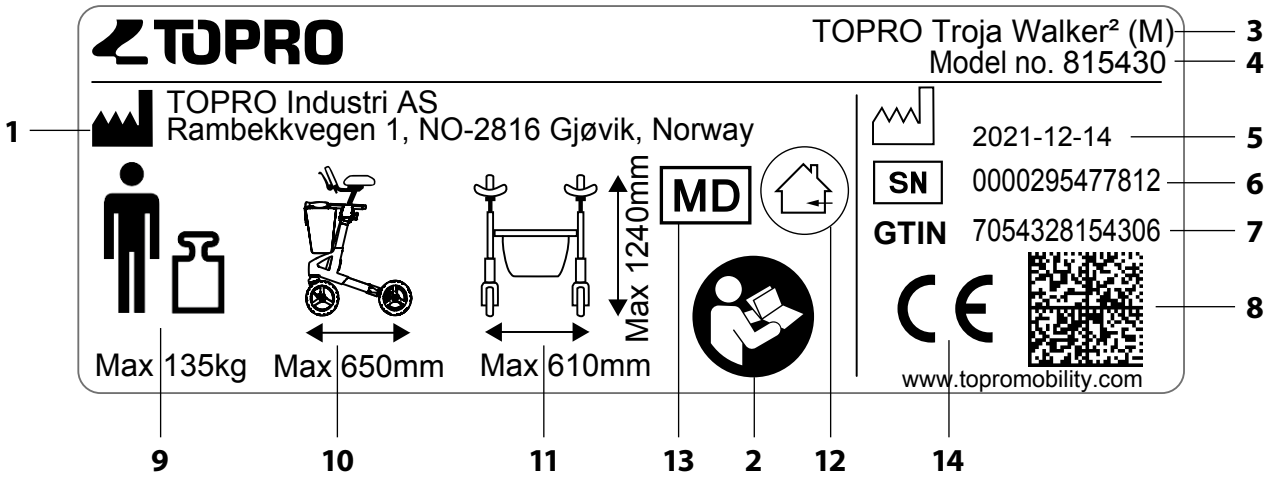


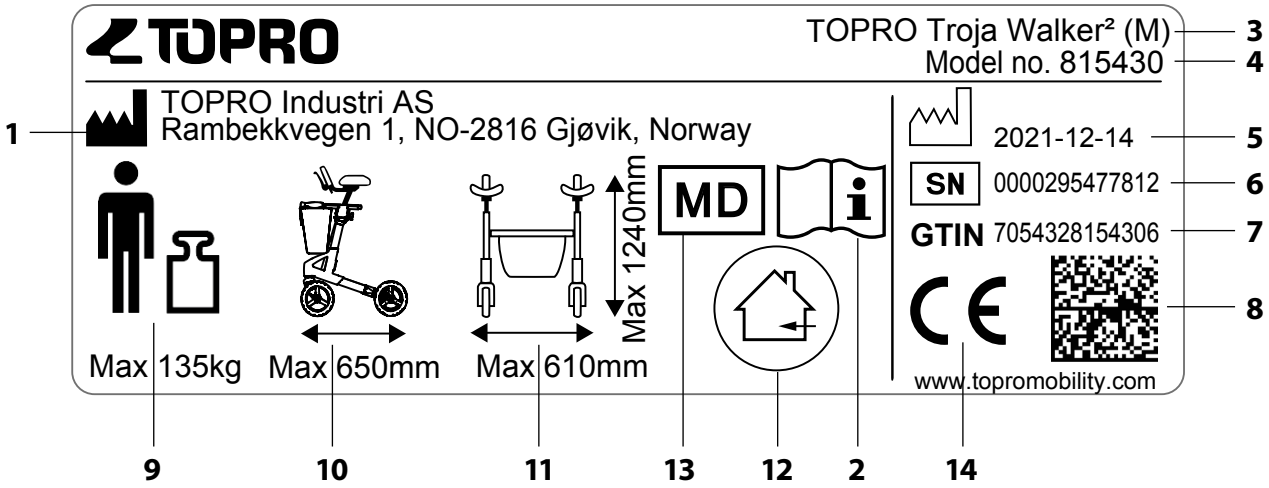

7

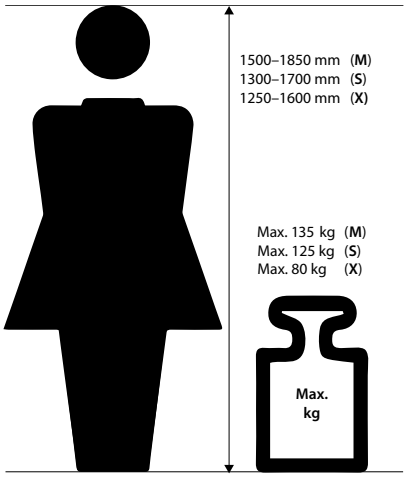


8


TOPRO
TOPRO Troja Walker² (M)
Model no. 815430
TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 1, NO-2816 Gjøvik, Norway
2021-12-14
SN 0000295477812
GTIN 7054328154306
Max 135kg
Max 650mm
Max 610mm
Max 1240mm
MD
www.topromobility.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


TOPRO
TOPRO Troja Walker² (M)
Model no. 815430
TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 1, NO-2816 Gjøvik, Norway
2021-12-14
SN 0000295477812
GTIN 7054328154306
Max 135kg
Max 650mm
Max 610mm
Max 1240mm
MD
www.topromobility.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14


1500–1850 mm (M)
1300–1700 mm (S)
1250–1600 mm (X)
Max. 135 kg (M)
Max. 125 kg (S)
Max. 80 kg (X)
Max.
kg

## Congratulations with your choice of a new TOPRO forearm walker

Every TOPRO forearm walker is developed, designed and manufactured in Norway. The product conforms to the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. It is tested and approved according to EN ISO 11199-3:2005. On receipt of the goods, please check your product. If you have any queries, please contact your mobility shop or dealer immediately. If you have problems reading this user manual, an electronic version is available on **topromobility.com.**

## Intended use

The TOPRO Troja Walker² shall give support to users with reduced balance and/or reduced walking ability. It is designed to be pushed, not pulled. The integrated seat provides an opportunity for the user to rest if needed. The intended user is an adult. Height and weight restrictions apply. *Contraindications: The product is not suitable for persons with low strength in arms, with very poor balance, or with considerable cognitive disabilities. The walker is designed and approved for indoor use on plain foundation*.

To get to know the walker and learn how to use it properly, training by a professional is recommended.

## 0 The grey numbered circles in this user manual refers to the numbered information graphic and illustrations inside the cover

## 1 Get to know your TOPRO product

**A** Forearm support
**B** Brake lever
**C** Handle tube
**D** Brake cable
**E** Seat bars / carrying handle
**F** Seat with strap for folding mechanism
**G** Locking clamp
**H** Spak för höjdjustering
**I** Basket
**J** Side frame
**K** Brake block / Edge guard
**L** Tilting function
**M** Supporting cord
**N** Product label

## 2 Safety ⚠

When folding and unfolding the walker, be aware so you do not hurt your fingers.

Be aware not to put your fingers in open holes or between stationary parts.

Make sure that the levers for height adjustment are positioned downwards.

When stationary or parked, make sure the parking brakes on both sides are activated (A).

Do not use the walker on stairs. Be careful when passing thresholds etc.

Check the brakes before use every time, and that the walker locks in unfolded position.

Do not use the walker to transport heavy loads or persons.

Be aware that some parts of the walker might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.

Do not modify the product as this might put your safety at risk and the guarantee will become void.

Before sitting on the seat (C), make sure the parking brakes on both sides are activated (A).

To reduce the risk of falling, do not lean or bend sideways or over to the back of the walker whilst in the seated position (D). Do not tilt the walker too much sideways, to avoid the risk of falling. For the same reason, bags etc. must never be hung on the handles.

To give the right support and safety, walk straight and make sure the walker is kept as close to your body as possible (E). Walk between the rear wheels (F), not behind them (G).

Be aware that the walker may roll faster than you when walking downhill, which may put you in risk of falling. Activate the driving brakes to adjust the speed (B).

Be careful when wearing fluttering skirts or trousers as they could get caught in the wheels, which could lead to falling. Wear sturdy footwear to avoid injuries.

Do not use the walker on slippery surfaces.

Keep the walker away from fire and hot items.

Do not climb on the walker.



Art. No. User Manual: 104848 – Revision D, 2026-06

## 3 Unfolding / Folding

**Unfolding:** Loosen the strap between the forearm supports (A) (not applicable for the walker in size X). Release the lock clamp positioned at the seat bars (B). Press the seat bars down and outwards (C). The side frames will slide apart and you will hear a clicking sound. The walker is now locked in its open position. Fasten the strap (A).
**Folding:** Loosen the strap between the forearm supports (A). Pull the strap on the seat (D) and press the side frames together. Lock the clamp (E) over the seat bars.
**Carrying the walker:** The walker must not be carried by the seat strap or the brake cables. Fold the walker together as shown on the illustration (F). When folded, carry the walker by the seat bars (G).

## 4 Forearm supports / Handles / Memory function

**Height adjusting:** Pull the lever (A) upwards and adjust the forearm support tubes to a suitable height. Then move them slightly up and down (C) until you hear a click. Ensure that the lever is pointing downwards (A). Set both tubes to the same height.
**Recommended height:** Stand between the rear wheels. Relax your shoulders and hold your elbows in a 90-degree angle. The level of the forearm supports should be fixed at the level of your elbows. A professional should help you with the adjustment of the forearm supports and the handles, to help ensure correct posture.
**Adjusting the handles:** Pull the lever (A) upwards. You can now pull the handle (B) backwards or push it forwards. It is also possible to adjust the angle of the handle. Once the handle has been adjusted to the desired position, return the lever (A) to the downward position. Be careful when opening and closing the lever (A) to avoid injury to your fingers.
**Memory function:** Set the height of the forearm support tube. Count the visible holes on the rear of the forearm support tubes (G). Loosen the screw on the top of the attachment piece (D). Pull the lever (A) upwards and pull the forearm support tube (G) out of the frame. The attachment piece (D) will now follow the forearm support tube. Move the attachment piece (D) so that the number of holes above the attachment piece corresponds to the number of holes counted previously. Insert the red memory clip (E) into the first available hole below the attachment piece (D). Pull the lever (A) upwards and push the forearm support tube (G), together with the attachment piece (D), down into the side frame (F). Reattach the screw to the attachment piece (D). Pull the lever (A) upwards and pull the forearm support tube (G) upwards until it stops. Then release the lever. If the forearm support tubes are in the lowest position, they will automatically stop at the preset position when pulled upwards.

## 5 Brakes

Make sure the brakes are working before every trip. Each brake lever (A) works on each of the rear wheels. *Do not drive or push the walker while the parking brakes are activated.*
**Parking brakes:** Push both brake levers forward (A) until they lock. Be aware that the lever has some resistance before it stops and locks the rear wheel. Pull the brake levers backwards to release the parking brakes.
**Driving brakes:** Pull both brake levers towards you (B) to reduce speed. *Do not use continuously while the walker is in motion.*
**Adjusting / checking:** Loosen the nut (C). Tighten the brake cable (D) with the adjustment screw (E). Adjust both brake blocks (F) so the distance to the wheel surface is approximately 1 mm and then tighten the nut (C). Make sure the brakes are not adjusted too tight and pressing hard into the rubber of the wheels when the parking brake is activated.
**Maintaining:** Clean the brake block (F) and the brake spring (G) regularly. The wheels and brakes can be replaced if they are worn out or damaged.

## 6 Seat

The walker has a safe and convenient mesh seat, which provides view to the ground while walking. It can easily be wiped with a cloth if needed. The parking brakes must be activated before using the seat. Push both brake levers forward until they lock (A). Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket (B).

## 7 Edge guard / Tilt function

**Edge guard:** The brake blocks (A), which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on corners, door frames etc.
**Tilt function:** To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt pedal (B), which is beside the rear wheel. This helps to tilt the walker over thresholds, edges etc. Please note: Be careful when passing thresholds etc.

### Basket

The basket holds up to 5 kilos. It can be removed and washed gently at 60 °C.

### Transport

The walker should be transported in the folded and locked position (*see section Unfolding / Folding*). Ensure that the lock clamp is on, so that the walker cannot unfold unintentionally. Be careful when loading the walker into a vehicle, giving attention to securing it.

### Storage

The walker should be stored in an upright position. If stored outdoors, then under cover to protect it. Do not leave your walker unattended. Do not put heavy items on top of the walker during storage.

### Cleaning

The walker can be cleaned using a damp cloth. In case of mud and grime accumulation, a cloth with a mild washing detergent can be used followed by rinsing with lukewarm water. Do not use high pressure cleaners and avoid flushing directly against ball bearings (in wheels and front forks). Do not use abrasives or steam wash. Dry the walker using a soft cloth. When cleaning in automatic washing systems the following applies: *Washing; 60 °C, 10 min. (pressure maximum 4 bars, pH neutral) – drying; 70 °C, 10 min.*

## Disinfection

Disinfection must only be carried out by authorized personnel. Please contact your local dealer or mobility aid centre. During disinfection sufficient protective equipment must be worn, and the instructions of the disinfectant manufacturer must be followed. The surface of the walker should be cleaned with a soft cloth or sponge and an approved chemical disinfectant containing 70–80 % ethanol. We advise against disinfectant that contains chlorine or phenol. Do not use heat disinfection. *The manufacturer cannot be held responsible for any damage or injuries that might occur using harmful disinfectant/measures or disinfection carried out by unauthorized personnel.*

## Inspection / Maintenance / Re-use

It is recommended that inspection and maintenance are carried out regularly (frequency is determined by how and how often the walker is used). Check the following items: Frame, screws, tubes, handles, forearm supports, brakes, brake parts, wheels, seat and accessories. This also applies when the walker is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions in this user manual about maintenance of brakes and cleaning/ disinfection. The recommended maintenance is not a requirement, and no preventive maintenance is required provided that the walker is used as intended according to this user manual.

## Material / Recycling

The walker is made of plastic-coated aluminium tubes, plastic couplings and material made of plastic and polyester. There are ball bearings in all wheels and forks. Most parts can be recycled. Dispose the walker and its packaging according to the applicable regulations in your country. For information, please contact your public authorities.

## Warranty

TOPRO Troja Walker² is guaranteed free of faults and defects for 7 years. Damage caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (e.g. brake block, brake cable, wheel, basket, seat and grip) are exempt from the 7-year warranty. For repairs during the warranty period, please contact your local mobility shop or dealer. The warranty is void if unauthorised spare parts or accessories have been or are being used on the product. The expected life span of the product is estimated to be 10 years if it is used in the correct manner according to this user manual and its safety and maintenance instructions.

## 8 Product label

1 - Manufacturer
2 - Consult Instructions for use (blue icon on the new label)
3 - Model name
4 - Model number
5 - Date of manufacture
6 - Serial number
7 - Global Trade Item Number
8 - GS1 DataMatrix
9 - Maximum user weight
10 - Maximum length of walker
11 - Maximum width / height of walker
12 - Intended for indoor use
13 - Medical Device
14 - CE-marking (This product conforms to Medical Device Regulation (EU) 2017/745)

## Accessories

| | TOPRO Item No. |
|---|---|
| Back support | **814765** |
| Tray (NB: not for size X) | **814728** |
| Anti-slip mat for tray (NB: not for size X) | **814059** |
| Crutch holder | **814040** |
| Bottle holder | **814043** |
| Stabilizer bar (size M / S) | **814729** |
| Stabilizer bar (size X) | **814730** |
| One-handed brake | **814026** |
| Guiding handle for the visually impaired | **814014** |
| Rear bag with zipper (NB: not for size X) | **814046** |
| Name tag | **814024** |
| Roll Resistance System (drag brake), pair | **814032** |
| Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid) | **814009** |

Accessories mounted on the walker may influence stability, we therefore advise you to use them with care. Accessories can be ordered separately to enable a TOPRO Troja Walker² to be customised to individual needs. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of available accessories or visit our homepage **topromobility.com.**

## Grattis till ditt val av ett nytt TOPRO gåbord

Alla TOPROs gåbord är utvecklade, designade och tillverkade i Norge. Produkten uppfyller förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den har testats och godkänts enligt EN ISO 11199-3:2005. Kontrollera produkten vid mottagandet och rapportera omedelbart till din hjälpmedelscentral eller återförsäljare om produkten är skadad. Om du har problem med att läsa den här bruksanvisningen finns en elektronisk version tillgänglig på **topromobility.com**

## Avsedd användning

TOPRO Troja Walker² ska ge stöd till användare med nedsatt balans och/eller nedsatt gångförmåga. Den är utformad för att skjutas framåt, inte dras. Den integrerade sitsen gör att brukaren kan sätta sig ner för att vila. Produkten är avsedd för vuxna. Höjd- och viktbegränsningar gäller. *Kontraindikationer: Produkten är inte lämplig för personer med mycket liten styrka i armar och händer, med väldigt dålig balans eller med stora kognitiva utmaningar. Produkten är konstruerad och godkänd för inomhusbruk på plant underlag.*

För att lära känna och förstå hur gåbordet fungerar rekommenderas en introduktion av din fackhandlare/hjälpmedelscentral.

## 0 Grå numrerade cirklar refererar till numrerade illustrationer på insidan av omslaget till denna bruksanvisning

## 1 Lär känna din TOPRO produkt

**A** Underarmsstöd
**B** Bromshandtag
**C** Handtagsrör
**D** Bromsvajer
**E** Sitsstång / Bärhandtag
**F** Sits med stropp för hopfällning
**G** Transportlås
**H** Spak för höjdjustering
**I** Korg
**J** Sidoram
**K** Bromskloss / Kantskydd
**L** Steghjälp
**M** Stabiliseringsstropp
**N** Produktetikett

## 2 Säkerhet ⚠

Var försiktig så att du inte klämmer dig vid utfällning/hopfällning av gåbordet.

Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna i hål eller mellan delar.

Kontrollera att spaken för höjdjustering av handtagen är ordentligt låst.

Använd alltid parkeringsbromsen (A) på båda sidor, vid stopp eller parkering.

Använd inte gåbordet i trappor. Var försiktig när du passerar trösklar och liknande.

Kontrollera bromsarna före varje användning och att gåbordet går i lås i utfälld position.

Använd inte gåbordet för transport av personer eller tung last.

Var försiktig vid hantering av gåbordet så att du inte skadar dig när det har varit utsatt för extremt höga eller låga temperaturer.

Gör inga tekniska ändringar av produkten, eftersom det kan riskera din säkerhet och garantin upphävs.

Använd parkeringsbromsen (A), på båda sidor, innan du sätter dig på sitsen (C).

Böj dig inte för mycket bakåt eller åt sidorna när du sitter på sitsen, för att undvika risken att tippa över (D). Luta inte gåbordet för mycket åt sidorna, för att undvika fallrisk. Av samma anledning bör inte påsar eller liknande hängas på handtagen.

För korrekt stöd och säkerhet, gå upprätt och försök hålla gåbordet så nära kroppen som möjligt (E). Gå mellan bakhjulen (F), inte bakom dem (G).

På sluttande underlag kan gåbordet rulla snabbare än din egen gånghastighet, vilket kan innebära en fallrisk. Använd bromsarna för att justera hastigheten (B).

Var försiktig när du använder vida kjolar eller byxor så att de inte fastnar i hjulen. Använd stadiga skor för att undvika skador.

Använd inte gåbordet på hala underlag.

Ställ inte gåbordet nära eld eller väldigt varma föremål.

Klättra inte på gåbordet.

## 3 Utfällning / hopfällning

**Utfällning:** Lossa stroppen (A) mellan underarmsstöden (gäller ej modell X). Lossa transportlåset på sitsstängerna (B). Tryck sitsstängerna nedåt och utåt så att sidoramarna glider isär. Tryck sitstängerna nedåt (C) tills du hör ett "klick". Gåbordet är nu låst i utfällt läge. Sätt fast stroppen mellan underarmsstöden (A).
**Hopfällning:** Lossa stroppen (A) mellan underarmsstöden. Dra stroppen (D) på sitsen uppåt och tryck ihop sidoramarna. Tryck transportlåset (E) över sitsstängerna.
**Att bära gåbordet:** Gåbordet ska inte bäras i stroppen på sitsen eller i bromsvajrarna. Fäll ihop gåbordet enligt illustration (F). Bär gåbordet genom att hålla i de samlade sitsstängerna (G).

## 4 Underarmsstöd / Handtag / Minnesfunktion

**Höjdinställning:** Dra spaken (A) uppåt och ställ in underarmsstödsrören till en lämplig höjd. För dem sedan lätt upp och ned (C) tills du hör ett klick. Kontrollera att spaken pekar nedåt (A). Ställ in båda rören på samma höjd.
**Rekommenderad höjd:** Stå mellan bakhjulen. Slappna av i axlarna och håll armbågarna i 90-graders vinkel. Underarmsstödet ska nu ställas in i höjd med armbågarna. Ta hjälp från din hjälpmedelscentral/fackhandlare för att ställa in underarmsstödet i riktig höjd för att undvika en felaktig kroppshållning.
**Justering av handtag:** Dra spaken (A) uppåt. Du kan nu dra handtaget (B) bakåt eller skjuta det framåt. Det är också möjligt att justera handtagets vinkel. När handtaget har ställts in i önskat läge, för spaken (A) nedåt igen. Var försiktig när du öppnar och stänger spaken (A) för att undvika att skada fingrarna.
**Minnesfunktion:** Ställ in höjden på underarmsstödsröret. Räkna de synliga hålen på baksidan av underarmsstödsrören (G). Lossa skruven på ovansidan av fäststycket (D). Dra spaken (A) uppåt och dra ut underarmsstödsröret (G) ur ramen. Fäststycket (D) följer nu med underarmsstödsröret. Flytta fäststycket (D) så att antalet hål ovanför fäststycket motsvarar det antal hål som räknades tidigare. Sätt in den röda minnesklämman (E) i det första lediga hålet under fäststycket (D). Dra spaken (A) uppåt och skjut underarmsstödsröret (G) tillsammans med fäststycket (D) ned i sidoramen (F). Fäst skruven igen i fäststycket (D). Dra spaken (A) uppåt och dra underarmsstödsröret (G) uppåt till stopp. Släpp därefter spaken. Om underarmsstödsrören är i det lägsta läget kommer de därefter automatiskt att stanna i den förinställda positionen när de dras upp.

## 5 Bromsar

Kontrollera att bromsarna fungerar före varje färd. Vardera bromshandtag (A) verkar på respektive bakhjul. *Gåbordet ska inte köras eller skjutas framåt när parkeringsbromsarna är aktiverade.*
**Parkeringsbroms:** Tryck båda bromshandtagen (A) framåt tills de låser sig. Var medveten om att handtaget har lite motstånd innan det stoppar och låser bakhjulet. Dra bromshandtagen bakåt för att frigöra parkeringsbromsen.
**Färdbroms:** Dra båda bromshandtagen (B) mot dig för att sakta ner farten. *Använd inte färdbromsen kontinuerligt när du kör gåbordet.*
**Justering / kontroll:** Lossa låsmuttern (C). Dra åt bromsvajern (D) med justeringsskruven (E). Justera båda bromsklossarna (F) så att avståndet till hjulet är cirka 1 mm och dra sedan åt låsmuttern (C). Bromsarna ska inte vara så hårt åtdragna att de pressas in i däckens gummi när parkeringsbromsen sätts på.
**Underhåll:** Rengör bromskloss (F) och bromsfjäder (G) regelbundet. Hjulen och bromsarna kan bytas ut ifall de blir utslitna eller skadade.

## 6 Sits

Gåbordet har en säker og bekväm nätsits, som ger synlighet mot underlaget där du går. Den kan enkelt torkas av med en trasa vid behov. Innan du använder sitsen måste parkeringsbromsarna vara aktiverade. Tryck båda bromshandtagen (A) framåt tills de går i lås med ett "klick". Båda bakhjulen är nu låsta. Sitt med ryggen mot korgen (B).

## 7 Kantskydd / Steghjälp

**Kantskydd:** Bromsklossarna (A) framför bakhjulen förhindrar att hjulet fastnar i hörn, dörrkarmar och liknande.
**Steghjälp:** För att använda steghjälpen placerar du främre delen av foten på pedalen (B) och pressar den nedåt. Denna funktion hjälper dig att vippa gåbordet över trösklar, kanter och liknande. OBS! Var försiktig när du passerar trösklar och liknande.

## Korg

Korgen tål last upp till 5 kg. Den kan tas av och tvättas försiktigt på 60°C.

## Transport

Gåbordet ska transporteras i hopfällt och låst läge (se avsnittet *Utfällning/ hopfällning*). Kontrollera att transportlåset är fastsatt, så att gåbordet inte fälls ut oavsiktligt. Var försiktig när du placerar gåbordet i ett fordon och se till att det är ordentligt säkrat.

## Förvaring

Gåbordet ska förvaras stående. Om det förvaras utomhus bör det täckas över för att skyddas mot slitage. Lämna inte gåbordet utan tillsyn. Placera inte tunga föremål ovanpå gåbordet under förvaring.

## Rengöring

Gåbordet kan rengöras med en fuktig trasa. Vid ansamling av lera och smuts kan en trasa med ett milt tvättmedel användas följt av sköljning med ljummet vatten. Använd inte högtryckstvätt och undvik att spola direkt mot kullager (i hjul och framgafflar). Använd inte slipmedel eller ångtvätt. Torka gåbordet med en mjuk trasa. Vid rengöring i automatiska tvättsystem gäller följande: Tvätt; 60°C, *10 min (tryck max 4 bar, pH-neutral) - torkning; 70°, 10 min.*

## Desinficering

Desinfektion får endast utföras av behörig personal. Kontakta din lokala återförsäljare eller din hjälpmedelscentral. Under desinfektion måste tillräcklig skyddsutrustning bäras och instruktionerna från desinfektionsmedelstillverkaren måste följas. Gåbordets yta ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel/-metoder som innehåller klor eller fenol. Använd inte värmedesinfektion. *Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för fel eller skador som uppstått vid användning av skadligt desinfektionsmedel/-metoder eller vid desinfektion som utförs av obehörig personal.*

## Inspektion / Underhåll / Rekonditionering

Det rekommenderas att inspektion och underhåll utförs regelbundet (frekvensen beror på hur och hur ofta gåbordet används). Kontrollera följande delar: Sidoramar, skruvar, rör, handtag, underarmsstöd, bromsar, bromsdelar, hjul, sits och tillbehör. Detta gäller också om gåbordet ska förberedas för återbruk. Se detaljerade instruktioner i denna bruksanvisning för underhåll av bromsar samt rengöring/desinficering. Det rekommenderade underhållet är inget krav och inget förebyggande underhåll (FU) krävs förutsatt att gåbordet används för avsett bruk i enlighet med denna bruksanvisning.

## Material / Återvinning

Gåbordet är tillverkat av plastbelagda aluminiumsrör, plastkopplingar och material gjort av plast och polyester. Alla hjul och gafflar innehåller kullager. De flesta delar kan återvinnas. Kassera gåbordet och dess förpackning enligt gällande regler i ditt land. För mer information kontakta myndigheterna i din kommun.

## Garanti

TOPRO Troja Walker² inkluderar 7 års garanti, undantaget skador som uppstår på grund av felaktig användning eller delar som är utsatta för normalt slitage (bromskloss, bromsvajer, hjul, korg, sits och handtag). För reparationer under garantitiden, kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Garantin upphävs om ej godkända reservdelar eller tillbehör används på produkten. Förväntad livslängd för produkten är 10 år under förutsättning att den används på avsett sätt enligt denna bruksanvisning och dess säkerhets- och underhållsanvisningar.

## 8 Produktetikett

1 - Tillverkare
2 - Läs bruksanvisningen (blå ikon på den nya etiketten)
3 - Modellnamn
4 - Modellnummer
5 - Tillverkningsdatum
6 - Serienummer
7 - Global Trade Item Number (GTIN-kod)
8 - GS1 DataMatrix
9 - Maximal brukarvikt
10 - Maximal längd på gåbordet
11 - Maximal bredd/höjd på gåbordet
12 - Avsedd för inomhusbruk
13 - Medicinteknisk produkt
14 - CE-märkning (Denna produkt uppfyller förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745)

## Tillbehör

| | TOPRO Art. Nr. |
|---|---|
| Ryggstöd | **814765** |
| Bricka (ej för modell X) | **814728** |
| Antihalkmatta för bricka (ej för modell X) | **814059** |
| Käpphållare | **814040** |
| Flaskhållare | **814043** |
| Stabiliseringsstag (modell S/M) | **814729** |
| Stabiliseringsstag (modell X) | **814730** |
| Enhandsbroms | **814026** |
| Styrhandtag för ledsagare för t.ex. synskadade | **814014** |
| Väska till baksidan, med dragkedja (ej för modell X) | **814046** |
| Namnskylt | **814024** |
| Rullmotståndssystem (släpbroms), par | **814032** |
| Korg för syrgasflaska (endast komprimerad, ej flytande) | **814009** |

Tillbehör som är monterade på gåbordet kan påverka stabiliteten, vi rekommenderar därför att du använder dem med försiktighet. Tillbehör kan beställas separat för att TOPRO Troja Walker² ska kunna anpassas efter individuella behov. Kontakta din hjälpmedelscentral, återförsäljare eller TOPRO för en uppdaterad översikt av tillgängliga tillbehör eller besök vår hemsida **topromobility.com**

**TOPRO products are developed, designed and manufactured in Norway by:**


# TOPRO Industri AS

Rambekkveien 1, NO-2816 Gjøvik, Norway
(+47) 61 13 46 00
info@topromobility.com
www.topromobility.com


Distributor / dealer

Learn more

topromobility.com




Art. No. User Manual: 104848 – Revision D, 2026-06